




Premium Tick Tok

Automatic Micro-pin massage activates your skin,
and enhances cosmetic absorption.

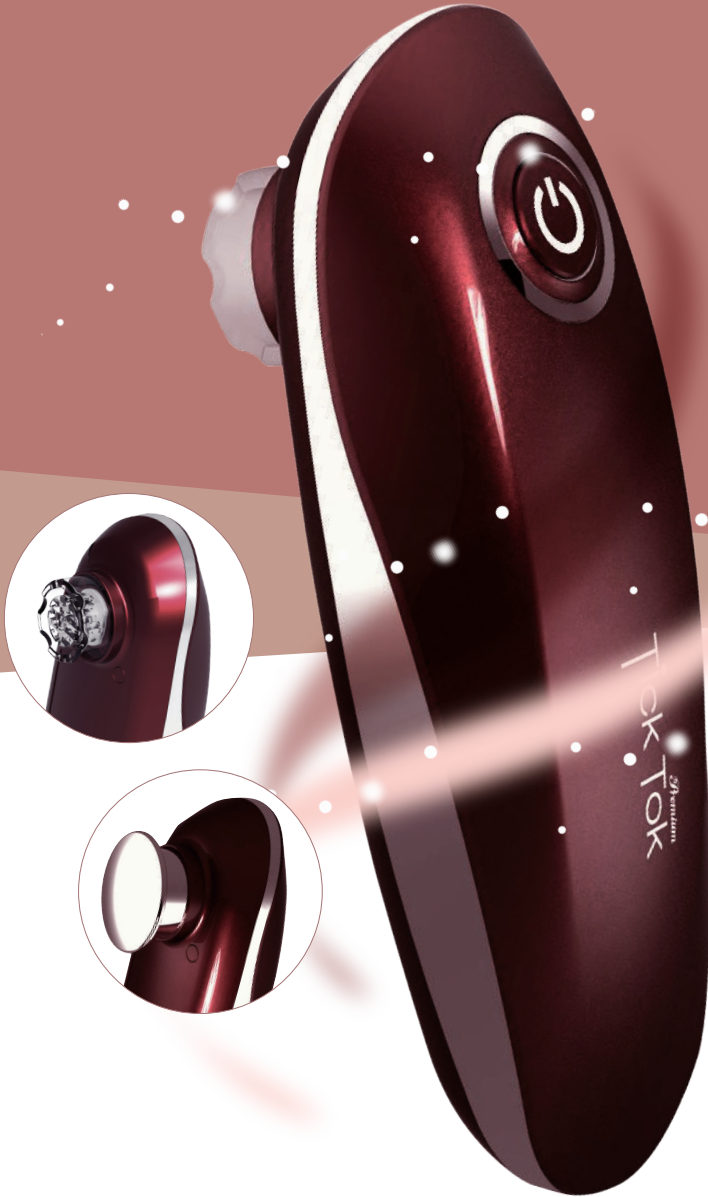

연세대 임상결과 최응호 피부과학 교수

피부에 미세한 홈을 만들어 주면 콜라겐 유도효과와 같은 결체조직 합성 증가의 효과가 있음이 보고되고 있다. 본 연구에서는 시술에 따른 콜라겐 유도 효과를 비교하기 위해 Masson-Trichrome 염색을 통해 진피의 밀도를 비교하였다. 먼저 0.25mm 길이의 미세침을 갖는 기계의 진피 밀도 차이에 대해서 비교하였는데, AMTS-H 시술군과 MTS 시술군 모두 대조군에 비해 통계학적으로 유의하게 진피 밀도 (결합조직 밀도)가 증가함을 알 수 있었다.

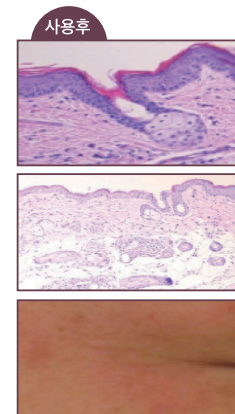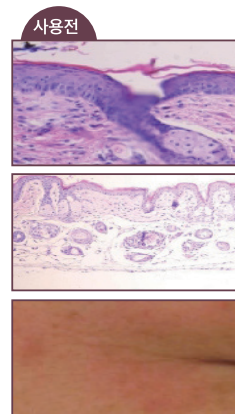

특허 · 인증



특허 2건

디자인 특허 2건

Specification

- 제품 크기 및 무게
 - 총 세트 : 190 x 163 x 50mm / 380g
 - 틱톡프리미엄 본체 : 가로 47.9 x 세로 130 x 높이 45.3mm / 105g(배터리 23g)
 - 마이크로핀 마사져 : 직경 20.3Ø x 높이 25.3mm / 6.2g
 - 이온토 도자 : 직경 30Ø x 높이 16.77mm / 4g
- RPM : 5,000/min
- 사용 시간 : 연속 사용 3시간
- 교체 알람 시기 : 전원 Led 표시가 깜빡거림
- 사용 건전지 : AAA 알카라인 1.5V 2개

(주)엠큐어

강원도 원주시 태장공단길 42-10 원주의료기기산업기술단지 4동 203호
대표번호 : 033-734-5970 E-mail : mcure@mcure.co.kr
www.mcure.co.kr

틱톡 프리미엄 이란?

AMTS + Iontophoresis 기능을 모두 갖춘 **다기능 홈케어 디바이스**로, 피부재생, 미백, 잔주름 개선, 보습 등의 효과가 있습니다.

제품의 특징

다기능 복합 홈케어 디바이스

AMTS, 이온도 포레스시스 기능을 모두 포함한 다기능 홈 케어 디바이스로 다양한 병원 시술 효과를 가정에서 얻을 수 있습니다.

피부 개선 효과 UP

틱톡 프리미엄의 마사지를 통해 피부 표면의 고의적인 자극을 주어 피부 표면 개선에 도움을 주며, 기능성 앰플 사용의 효과를 더 높여주는 제품입니다.

알레르기 걱정, 통증 걱정 DOWN

인체에 무해한 열균 플라스틱 마사지를 사용하여 금속제품에 알레르기가 있는 사람들도 알레르기 걱정 없이 사용 가능합니다. 또한 플라스틱 마사지는 금속 니들에 비해 마사지 시 자극이 적어서 통증에 대한 걱정 없이 마사지할 수 있는 장점이 있습니다. 기존의 MTS 효과, 집에서 안전하게 피부관리해보세요.

일상생활에 부담 없는 홈 케어

짧고 간단한 사용 방법으로 부담 없이 사용이 가능하며, 사용 후 바로 일상생활이 가능합니다.

최고의 가성비

소모품만 교체하면 반영구적으로 사용할 수 있으며 병원 시술보다 훨씬 경제적입니다.

제품구성

마이크로핀 마사져 3개 / 가이드 2개 (Long, Short) / 이온도 도자 1개 / AAA건전지 1set



마이크로핀 마사져



흰색 가이드 (Short)



검정 가이드 (Long)



이온도도자




건전지(AAA)

틱톡프리미엄 기능


마이크로핀 마사지

피부에 수동으로 자극을 해주는 스텝프, MTS, 메조롤러 등의 기능을 자동으로 손쉽게 할 수 있도록 만든 Auto MTS 기능. 의도적으로 피부에 상처를 내서 자연적 상처 치유 작용을 일으켜 콜라겐 생성을 유도하고, 미세한 holes을 통해 화장품 흡수율을 극대 화 해줍니다.

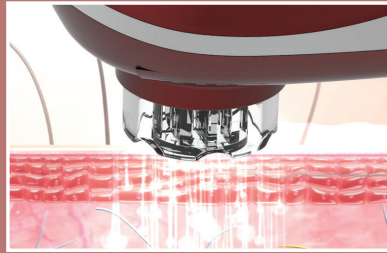

이온도 포레스시스

일반적인 방법으로 솔루션을 바르면 화장품의 유효성분이 피부 내로 깊숙히 침투하지 못하고 표피에 머무르게 됩니다. 이온토포레스시스 기능은 직류전류 의 이온영동 현상을 이용하여 피부 진피 내 멜라닌 세포층까지 솔루션을 효과적으로 투입해 줍니다.

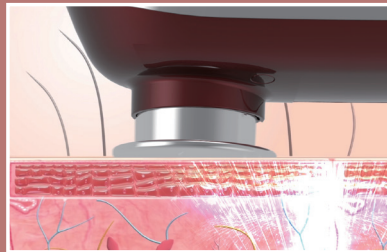

Indication

피부재생, 미백, 잔주름 개선, 보습, 모공 축소

사용방법

1 앰플(솔루션)을 바른다.

MPDRN 또는 울트라 틱톡 앰플 추천
(틱톡 마사지에 최적화 된 솔루션)
앰플을 2~3ml/1회 정도 사용



2 제품본체에 피부마사지기를 끼운 후 가이드를 장착하여 얼굴피부를 마사지(자극)한다. (상하운동)

가이드 및 피부마사지기 장착 방법은 뒷면에 설명된 "부품별 장착 및 제거 방법" 을 참고하여 장착 및 제거한다.



3 이온도마사지를 한다. (침투 및 진정효과)

본체에 솔루션 일체형 자극기와 가이드를 제거 후 이온도도자 를 장착한다.
이온도마사지를 하여(마스크팩이나) 피부에 남은 솔루션의 흡수를 도와준다.



4 마무리

Tip. 마스크팩 또는 재생크림으로 피부의 수분 보충 및 피부 진정, 재생을 돕는다.

